

## 品質保証について

万一、お買い上げ頂いた製品に欠陥がある時は修理、または交換の補償をさせていただきます。ただし、お客様の不注意による取扱いや、間違った使用、火災、天災などによる損傷は保証の対象外となりますので、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

- 1.品質保証期間はお買上げ後1年間です。  
この期間経過後は原則として、有料となります。
- 2.破損品は補償の際に必要となりますので、捨てずに必ずお買上げ店へお持ちください。
- 3.品質・機能については素材が経年変化し、5年程度で強度が低下することがあります。  
その後の使用はご注意ください。  
また、使用頻度により摩耗し性能が劣化します。  
(使用している素材により異なる場合があります。)

## アフター・サービスについて

この製品や部品の修理等については、お買上げ店までお申し出ください。修理の際には改良品や同等の代替品を使わせて頂くことがあります。

### 〈 次の点にもご注意ください。〉

- 1.使用時は樹木や草花などを傷つけないように配慮してください。
- 2.ベンジンやシンナーなどの有機溶剤をポールにつけないでください。性能が劣化したり、色落ちすることがあります。
- 3.破損後などの廃棄に際しては、各行政の指示に従い、不燃物として必ず分別廃棄してください。
- 4.使用しないで持ち運ぶ時は、必ずシャフトを固定してください。固定しないまま持ち運ぶと、下シャフトが抜落ち、紛失する恐れがあります。

## 健康いっぽん杖

# 取扱説明書

この度は当社製品をお買上げ頂き、ありがとうございます。

- 本製品を正しく安全にご使用頂くために、この説明書は必ずお読みください。
- 内容をご理解頂き、記載の危険、注意事項をお守りください。
- また、いつでもご覧頂けるように大切に保管してください。

このステッキはタウンユースの歩行補助を目的に設計製作されています。

**ハイキング・山歩きには  
使用しないでください。**

※この取扱説明書の他にも、説明書やタグが付属している時は、それらと一緒に保管をお願いします。



### ⚠️ ご注意!

この杖は、杖を持たなくても自立歩行できる人がより安定した歩行をするために、補助的に使用するものです。次のような方は危険ですので使用しないでください。

- 1.杖が無くては歩行できない人。  
(手摺りなどに伝わらなければ歩行できない人や、介助者に手伝ってもらわなければ歩けない人など)
- 2.リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩けない人。ただし、医師などの指導の元で使用する場合はこのかぎりではありません。

※購入後に上記のような症状が出た場合も使用は中止してください。

※杖に頼りすぎると肩や手を傷める恐れがあります。また転倒などから思わぬ大事故につながる危険があります。

本製品について、お気付きの点や不明点がございましたら、気軽に下記までお問合わせください。

株式会社 **シナノ**

〒385-0022 長野県佐久市岩村田1104-1

TEL.0267-67-3324 お客様相談室


<https://www.kainos.jp>



このステッキはタウンユースの歩行補助を目的に設計製作されています。

**ハイキング・山歩きには使用しないでください。**

## ●各部の呼称と使用方法

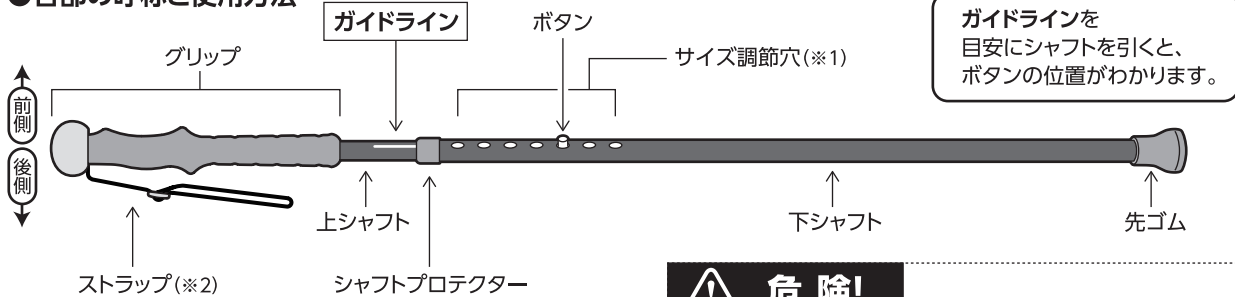

## 長さ調節方法

- ① ボタンを押し上シャフトを引き出します。
- ② 使い易い長さのサイズ調節穴にボタンを掛けて、長さを決めます。
- ③ 収納する時は、ボタンを押し上シャフトを押し込み、最下段の穴にボタンを掛けます。

※1 サイズ調節穴の数はモデルによって異なります。

※2 モデルによってはストラップの付かないタイプもあります。



## 危険!

ボタンは確実にサイズ調節穴に入れてください。中途半端に掛かっていたり、外れていると、シャフトが固定せず、危険です。またシャフトを紛失する恐れもあります。



## ご注意!

1. 身体に合った長さに調節してご使用ください。不適切な長さで使用すると事故等の原因になり、危険です。
2. 使用後は、シャフトを抜いて水分や汚れを拭き取り、内部を乾燥させてください。そのまま放置すると内側が錆びて、故障の原因となります。



## 危険!

## お取り扱い注意

1. 長さが体に合わない時は、使用を中止してください。使いづらい長さは事故の原因となり、危険です。
2. ご使用前に必ず各部の点検をしてください。万一異常が認められた時は、使用しないでください。  
《グリップのキズやヒビ、シャフトのキズ・曲がり、ボタンの不具合、各部のガタツキ、先ゴムの異常、など…》
3. 使用後は水分、汚れ等を拭き取り、屋内の乾燥した場所に保管してください。高温・低温、多湿の場所に置くと、各部の機能が低下し、劣化の恐れがあります。
4. グリップ以外の所を持って歩かないでください。また前後に極端に斜めにして使わないでください。危険です。
5. 小石や段差のフチなどに先ゴムを乗せないでください。接地の不安定な状態での使用は危険です。地面に先ゴム全体を乗せ、安定した状態でご使用ください。また、段差にもご注意ください。
6. 道路側溝や凹みのある場所では、杖先がはまり込む危険があるので、十分注意してください。また、先端を隙間に入れてこじったり、物を突いたり、叩いたりしないでください。
7. 柔らかい地面や、雪道、滑りやすい所では使用しないでください。止むを得ず使用する場合は、充分注意し、杖だけに頼らず同伴者などの支えを得てください。

8. 雷の音が聞こえたり、落雷の恐れのある時は使用しないでください。危険です。
9. 用途以外(例えば、登山用、護身用等)には使用しないでください。
10. 先ゴムが摩耗したり、破れた時は使用を止め、速やかに交換してください。取替えの際は専用品を使用し、説明書に従い確実に取付けてください。中途半端な取付けは危険です。
11. 先ゴムは必ず装着してください。外したまま使用すると、小石が挟まったりして非常に危険です。
12. お子様遊び道具にしないようご注意ください。

## 〈ステッキ本来の使い方をしてください!〉

ステッキ以外の目的で使用したり、誤った使い方をするとシャフトが曲がったり、折れる恐れがあります。シャフトが曲がると、長さ調節タイプは調節ができなくなります。



## 危険!

## 改造はしないでください。

お客様による修理、分解、改造等は危険なため、絶対にしないでください。