


点滴棒 サイズ変更方法


サイズ調節ピンを引き抜き
使用したいサイズの穴までスライドさせ
再びピンを差し込んで固定します。

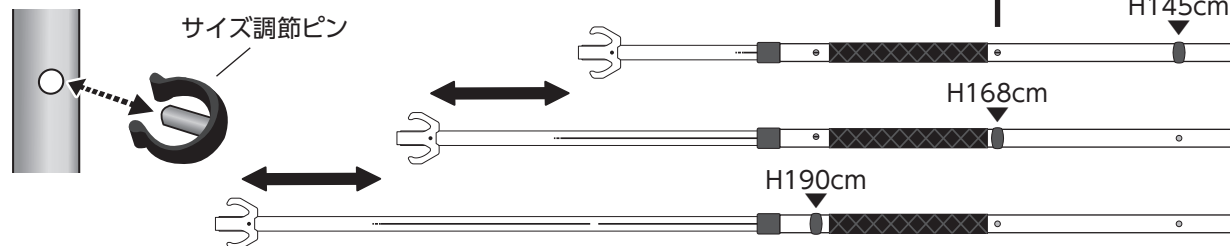

※点滴等は必ず取り外してから作業してください。※ピンを抜くと内側のシャフトが滑り落ちます。抑えながら、または2名で作業してください。
※サイズを変えた際は、サイズ調節ピンが確実に取り付けられていることを確認の上ご使用ください。


ポンベの設置

対応するポンベを
図の位置に設置します。

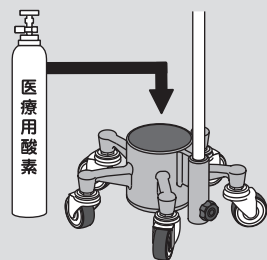

キャスター ストッパーについて

キャスターストッパーは
図の位置にあります。
必要に応じて
ご使用ください。

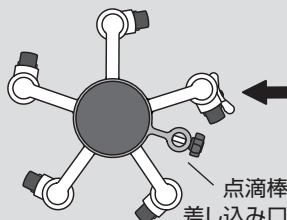

警告・注意

- 本製品を本来の目的以外に使用しないでください。
- 製品に寄りかかる、腰かける、乗るなど
過剰な負荷を与えないでください。
- 修理や分解、改造、付属部品以外の取り付けを行わないでください。
故障や破損の原因となる可能性があります。
- 製品には伸縮・可動部、また鋭利な箇所があるので、
指を挟むなどケガにはご注意ください。
- 砂利等の凹凸や段差のある場所・傾斜地での使用は
転倒の危険がありますのでお控えください。
- 点滴棒に点滴パックやボトル以外のものを吊るさないでください。
- フックの耐荷重は2kgまでです。それ以上は掛けないでください。
転倒や変形、破損する恐れがあります。
- 点滴棒にパックやボトルを吊るした状態でのサイズ調整は
おやめください。急激に短くなって指や手を挟んだり、
チューブが絡まる・抜けるなどの危険があります。
- ストーブの近くなど熱くなる場所には置かないでください。
製品が変形したり、ヤケドをする恐れがあります。

【 日常の点検・お手入れ方法 】

日常の点検

ネジ、ピンなど各部に緩みが無いことを
確認してください。

お手入れ方法

- 清掃する場合は、
乾いた布で拭き上げてください。
- 汚れが気になる場合は水を含ませて
固く絞った布で拭いてください。
※持ち手のストッパー部分は強く擦ると黒く
なることがありますのでご注意ください。
- ベンジンやシンナーなど
の有機溶剤を製品に
付けないでください。
性能が劣化したり
色落ちすることが
あります。



「よりそいくん」の製品特徴・使用方法につきましては
WEBページに掲載しております。合わせてご覧ください。
<https://sinano.co.jp/product/yorisoikun2/index.php>

本製品について、お気付きの点や不明点がございましたら、お気軽に下記までお問合せください。



株式会社 シナノ 〒385-0022長野県佐久市岩村田1104-1
(営業部) TEL.0267-67-3321 <https://sinano.co.jp/>



車いすポンベキャッチャー

よりそいくん2 取扱説明書

この度は当社製品をお買上げ頂き、
ありがとうございます。

本製品を正しく安全にご使用いただくために
この取扱説明書は必ずお読みください。

またいつでもご覧いただけるように
大切に保管ください。

製品仕様

サイズ

- ・本体：外径φ345×1,455～1,905mm
- ・ポンベ固定リング内径：φ105mm
- ・ハンドル対応径：φ22mm
- ・車輪径：φ65mm

重 量

本体:3.9kg(アタッチメント0.2kg)

使用長(点滴台)


1,455mm/1,680mm/1,905mm(3段階調節)

材 質

- ・点滴フック：スチール
- ・点滴棒：アルミ合金(φ18/22mm)
- ・点滴棒グリップ：合成ゴム
- ・ポンベキャリア：アルミ合金
- ・キャスター：ウレタン
- ・ジョイントパーツ：アルミ合金

装着可能な車椅子

ハンドル対応径はφ22です。

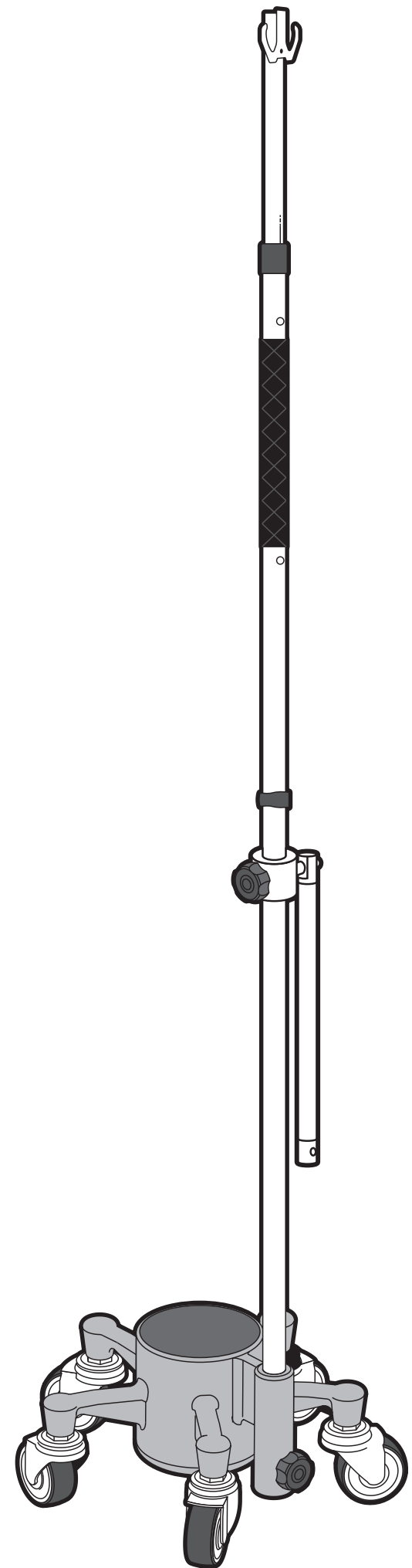


よりそいくん2


構成部品・名称

下記の部品が全て揃っていることを確認してください。


●ジョイントパーツ

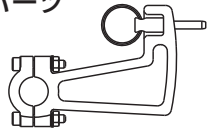

●点滴棒


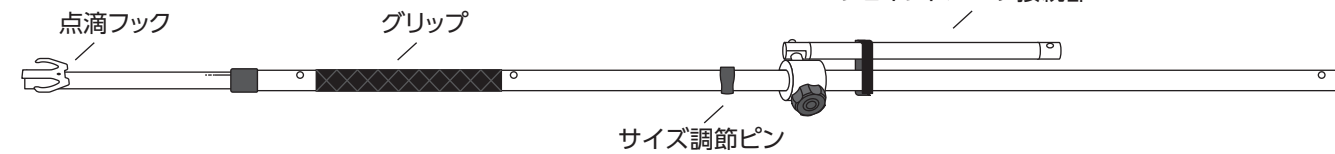


●ポンベキャリア

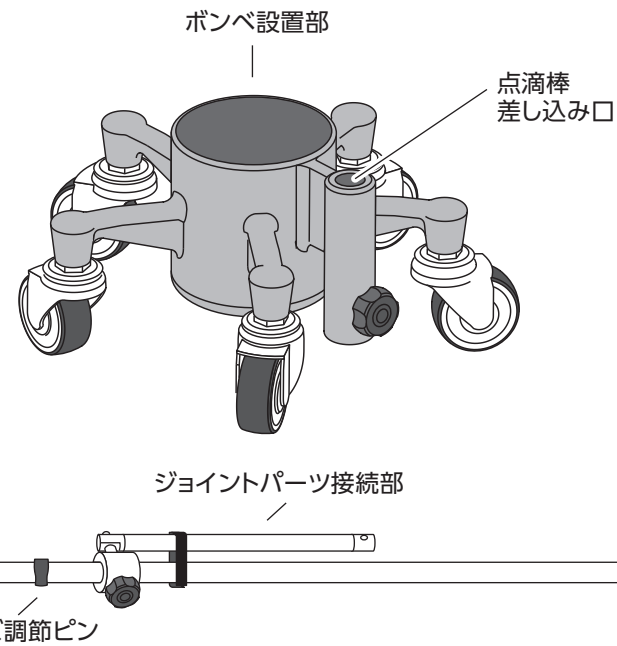


組立方法 本体の組み立て

- ① 図のネジ⑦を左回しに回して取り外します

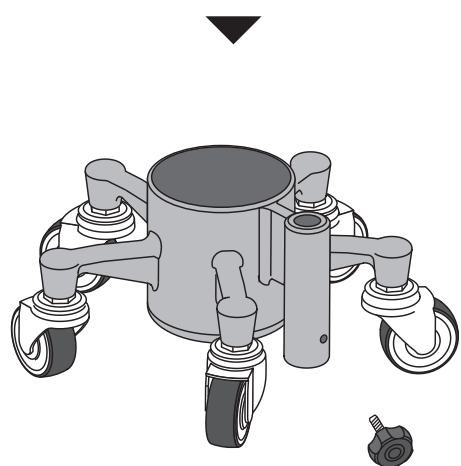
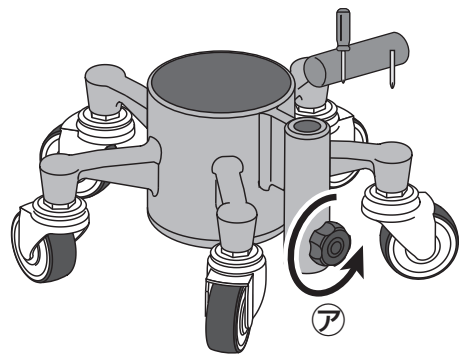


以下の手順は製品を横に倒してから行うと作業しやすいです。

- ② 点滴棒を差し込み口に差し込みます。

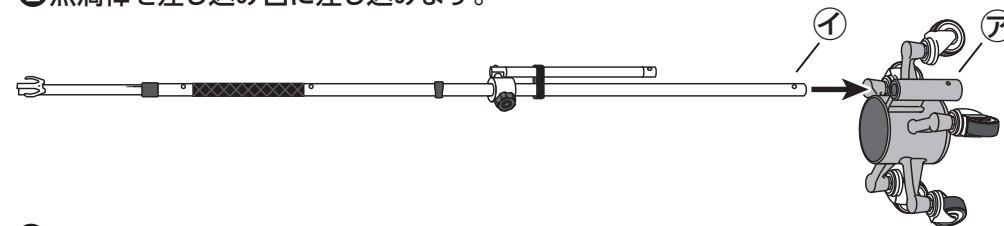


- ③ 差し込んだ点滴棒の一番下の穴①と⑦のネジ穴を合わせ、ネジを差し込み右回しに回して固定します。

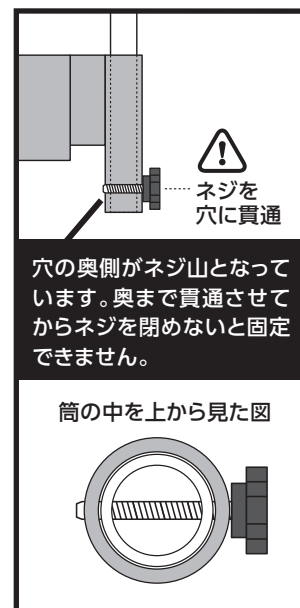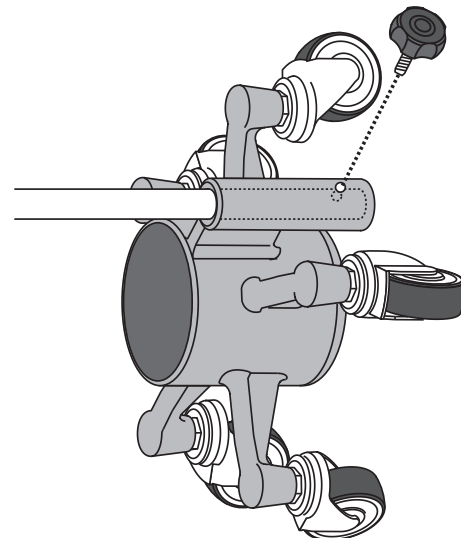


車椅子への取り付け方法

車椅子側の準備


※使用する車椅子を準備してください。

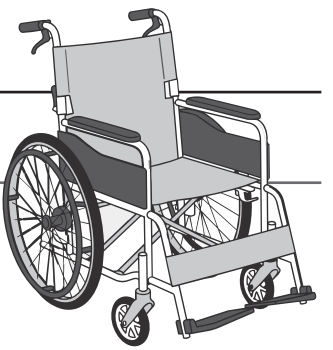


- ① 車椅子のハンドル部のブレーキレバーのパーツ固定部のネジを緩めます。

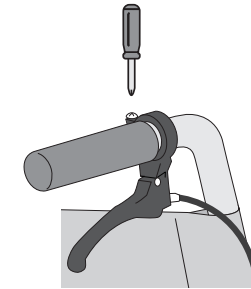


- ② 車椅子のブレーキレバーをハンドル部から離し2cmほど隙間を空け固定します。

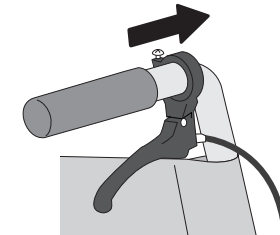

- ③ ジョイントパーツの2箇所、ネジを六角レンチで取り外します。

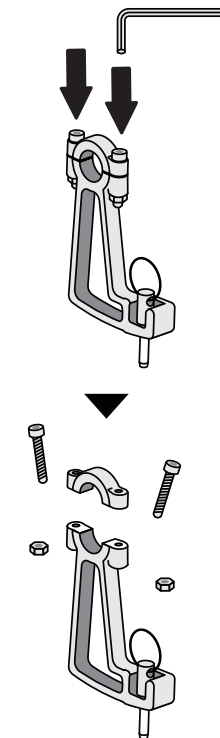


- ④ 図のようにジョイントパーツの下部分にブレーキレバーを通し、上部分でハンドル部を挟むように2箇所のネジで固定します。

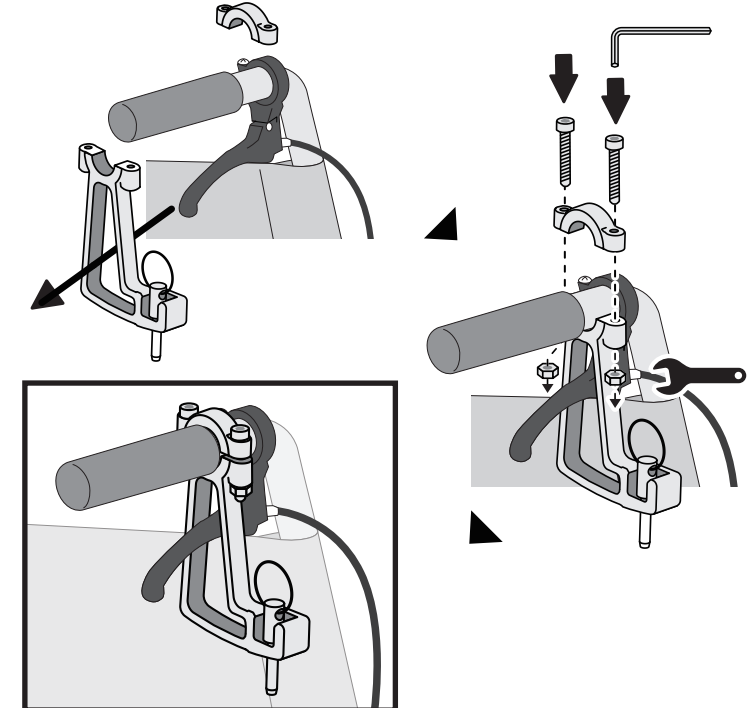


取り付け方法

※取り外しは下記手順の逆順で行ってください。


- ① 図の部分のピンを上引き抜きます。

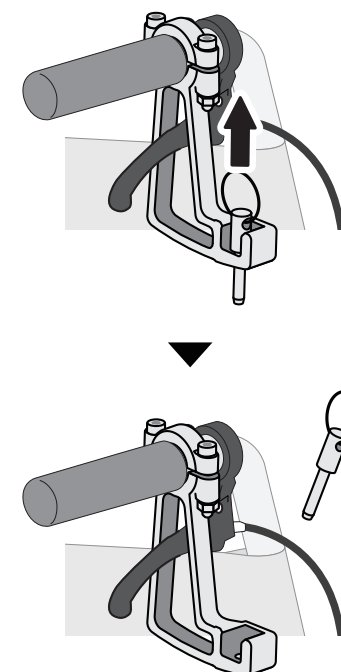

- ② よりそいくん2本体の「ジョイントパーツ接続部」のネジを左回しに回して緩め、図のように接続バーを車椅子側のジョイントパーツ接合部に合うように高さ調節します。

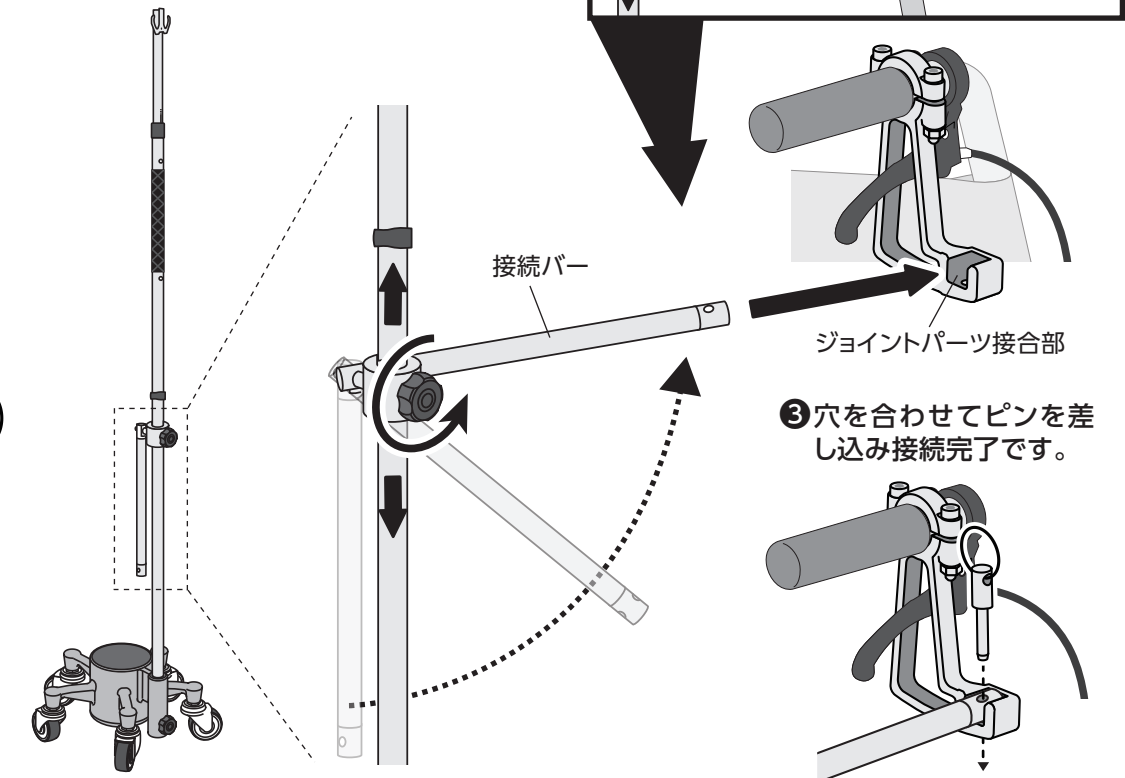

接続バー取り付け角度について

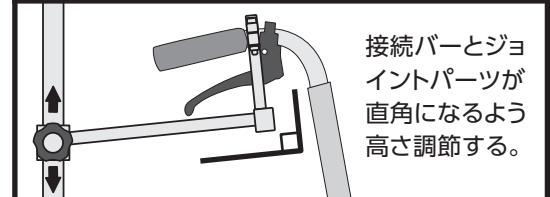

- ③ 穴を合わせてピンを差し込み接続完了です。

