

この通信は、シナノ社員が「もっと皆様のお役に立ちたい!」「楽しんでもらいたい!」「皆様と仲良くなりたい!」そして「商品やシナノのことをもっと知って頂きたい!」という思いで作っております。ですので最後まで読んでいただけると嬉しいです。

シナノ通信

しっかりもの。

VOL.76
 2025/MARCH



お待ちせしました! 今月いよいよ『しっかり2本杖』が発売開始です! もともとダイエツトとしての要素が強かったポールウォーキングを「躍介護業界」さらには医療業界にまで、広くご支持いただけるきっかけになった、シナノのウォーキングポールのヒット商品『あんしん2本杖』。その発売から15年、満を持してのリリースとなるのが『しっかり2本杖』です。「これまでの『あんしん2本杖』と何が違うの?」と多くのご質問をいただきますが、簡単に言ってしまうと「しっかり頼れる2本の杖」なのです。ポールを相棒、つまり人生の友に例えらるとならば「心細い時にいつも一緒にいて“安心”できる友」と、「辛い時も頼りがいがある“しっかり者の友”と言ったところでしようか。うーん?なんとなく伝わったでしょうか... さあ詳しくは中面のページで!!

編集長やまうら



今月のお知らせ

仕様変更

▶ **ピクチャレスク フラワー**
 ルドベキア 【色変更: ブラウンマーブル】

▶ **グランドカインス ブラック** ▶ **カインス真田**

① アールデコ・アート&クラフツ・ヘリンボーン、カインス真田BK 【素材変更: アクリル→BK革巻き】

② アールヌーヴォー・千鳥格子 【色変更: BRN革巻き→BK革巻き】

今春生産ロットより順次切り替えとなりますこと、ご承知おきください。

※詳細は改めてご案内いたします。



PICK UP!

ピックアップ商品コーナー

どこが違うの!?



しっかり2本杖 徹底解剖!

左右専用に
手に
フィット

頼りような
荷重は
NG

長さ調整
細かく
できる

「あんしん」の
良さは
変わりません

開発
ストーリー



こぼれちゃいます!

はさむわです!

しっかり
ポイント

お出かけの機会が増え、
健康につながれば嬉しい。

今まで自立歩行が難しいお客様に、安全面から「あんしん2本杖」のご使用はお断りしなければいけません。そこで、今まで以上に安全性と利便性を追求した2本杖を開発したいと考えました。苦勞したのは、杖でも好評のソフトグリップ。新形状のため、設計に試行錯誤しました。歩行に課題を抱えても使いたい福祉用具が選べ、自由に安全に移動ができる、元気に前向きな人生を送ることができる、今後も、そんな明るい未来の実現をお手伝いできる製品の開発を続けられたら嬉しいです。

あんしん2本杖

しっかり2本杖

転倒予防

使用目的

歩行サポート

× 使用不可

自立歩行が
難しい方

○ 使用可

シルバーカー・1本杖

検討する
福祉用具

歩行器・4点杖

45kg

耐荷重

69kg

ウォーキング スポーツ用
シャフト
曲げ強度 40Nm

SG認定の違い

ウォーキング サポート用
シャフト
曲げ強度 50Nm

左右あり

グリップ

左右なし + 発泡グリップ

2個

ラチェット
ボタン

1個

φ16 + φ14

シャフト
の太さ

φ18 + φ16

直径14mm対応のもの
PP-10-14mmAV
PP-21-14mm

適合する
先ゴム

直径16mm対応のもの
PP-10-16mmAV /
PP-18-16mm / PP-26-16mm

左右共通
自由で
らくちん

さらに
発泡素材で
柔らかく・太く
握りやすい

あんしん2本杖の
1.5倍
強い

長さ調整
迷わず
簡単

太くなったのに
軽い
220g/1本

杖で人気の
滑りにくい
3点先ゴムも
装着可能!

違いはこれだっ!

- ◎ 荷重をかけて使用できる
- ◎ 対象者と用途(カテゴリー)が違う
- ◎ 業界初のSG認定
ウォーキングサポート用2本杖

シルバーカーを使用し、家の中でも掴まらないと歩けません。ですがこの「しっかり2本杖」を使うと自然に手が前に出る、自然な歩き方になる。だから自分の力で歩いている感じがとてもいい。背筋も伸びて家族も私もびっくりです。


モニター使用いただいたお客様の声(90代/女性)

あんしん2本杖と同じように簡単に使用、さらに強く・扱いやすくなったため自立歩行が難しい方が頼って歩いてもOKな名前の通り「しっかりな」2本杖なのです!!

詳しくはホームページをご覧ください▶



グランドカインス・グランドカインスDONNAの 鹿革グリップお手入れ方法

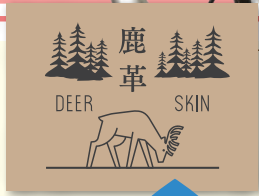

日常の お手入れ

一般的な杖のご使用状況であれば、市販品の
革用クリームを年1~2回使用いただければ十分。
※多用はNG! 逆に革が痛んでしまいます。

水濡れの 場合

乾いたタオルなどでできる限り水分を拭き取ってから、**陰干し**します。
※ドライヤーの使用は革の縮みの原因、縫い目を痛める可能性もあるので厳禁です。


革が 汚れた 場合

難
思
っ
て
ま
さ
さ
う
!?

- ① 乾いた柔らかい布で優しくこすり、汚れを落とします。
- ② 落ちていない汚れには、**中性洗剤**を含ませ固く絞った綿布など
柔らかい布で拭き、乾いた柔らかい布で拭き上げ、陰干しします。
- ③ それでも取れない汚れの場合には**革用クリーナー**をお試しください。



鹿革の特徴は、「高い吸湿性」と「しっとりとした肌さわり」
適度な油分を含むため、頻繁なお手入れは不要なこともポイント。
とはいえ、革製品のお手入れは気になるところ…!
お手入れのお問い合わせの参考にしていただけると幸いです。

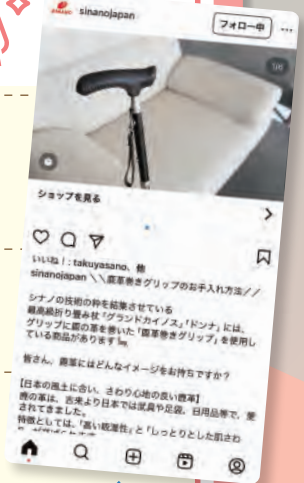

Facebookでチェック!



from お客様相談室



新発売 新しくなった!
フラミンゴの羽

お待ちかね!
フラミンゴの羽(杖フック)が
リニューアルされました。

リニューアルポイント

◎サイズ調節式になりました!

直径18ミリ~20ミリの杖に取付可能です。



直径
18
mm

直径
20
mm

◎取付方法は締めるだけの簡単構造!

- ① 取付部分を広げて、② 杖に差し込み、③ カチカチッと締めるだけ。
どなたでも簡単にお使いいただけます。

3 簡単取付 STEP

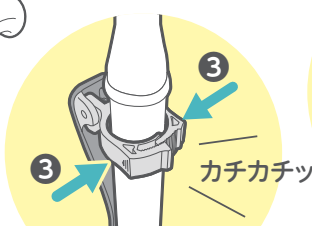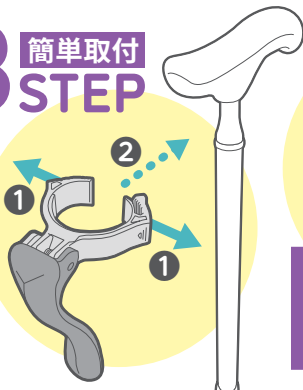

ここがポイント!
音がしなくなるまで
しっかりと締めます。

詳しくは
動画でチェック!



ニニのホルダー部が
新しくなりました!



これまで取付けに必要なだったリングは不要になり、
より多くの種類の杖に取付けられるようになりました。
お取り扱い、どうぞよろしくお願いいたします!

今月のテーマは...

シナノやあなたの
しつかり
ポイント
教えて!

シナノ通信ニューフェイス編



たいへん
よくでき
ました

シナノは頑張った
分だけ言平価されるの
がしつかりしているなと
思いました。

製造 なかざわ



リアル筋力で
支えられてる
シナノ事務...



バレーボールと
ウォーキングで鍛えた
某経理事務員の足!!

総務 しんち

まだシナノ歴が浅いスタッフに
シナノから滲み出る健全・堅実さが
伝わっているか聞いて(確かめて)みました!



専用ハウス完備

雪が積もった朝、会社の雪が初参加の
ほとんど雪がそのための
物置きがありビックリ...!!
家が長野県、備えが
しっかりしています!

技術開発 ふるや

ものづくりの現場から

私は複合的機能に魅せられやすい。そういつぶうに深層心理に深く刷り込まれている。ちゃんとリンスししてくれるシャンプーのCMで薬師丸ひろ子が言う「ちゃんリン・シヤン」と、ビジュアルを多感な時期に見たせいだ。+αに弱い。結局その機能使わないせいで壊れやすいとか蛇足的で失敗することもある。まありますが。いわゆる昔はテレビデオのようなわかりやすい複合(というか合体)が多かったですね。そういえば初めてのゲーム機もツインファミコンという任天堂ではなくシャープが発売したファミコンと後続で発売されたディスクシステムの両方遊べる複合機でした。シナノでも人生や用途に合わせて変形合体でき、長さも持ち手も半世紀よりそえる近代的複合ポール「サモ・ハン・キンポー」が閃きました。が、ジャッキーもユン・ピョウも欲してきたのでプロジェクトAを見ざるを得ないです。(小野沢)

フォロー
お願いします!

シナノFacebookで
最新情報を発信中!



SINANO

株式会社シナノ
〒385-0022 長野県佐久市岩村田1104-1
TEL:0267-67-3321 FAX:0267-67-3326

